

AHP2

Indicator Strips

For use with 2% High Level
Disinfectant and Sterilant

Part No. AHP2

Description

Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®) Indicator Test Strips are easy to use dip-and-read reagent strips for a pass or fail determination of hydrogen peroxide concentration in disinfectant solutions for variety of applications.

Direction For Use

1. Dip the padded end of the indicator test strips into the test solution and remove after one second.
2. Gently shake off the excess solution. Once removed, hold the strip horizontally and start the timer.
3. Wait for 60 seconds then compare the colour on the reagent pad with the reference colour block. If the colour on the reagent pad is lighter than the reference colour block for a "PASS", then the concentration of hydrogen peroxide is below the minimum recommended concentration for the product and should be discarded. "FAIL" colour blocks are provided only for reference and should not be used for measuring or quantifying the level of hydrogen peroxide in the solution.

NOTE: Delayed reading of the strip color may invalidate the results.

Shelf life

Do not use the strip after the expiration date. Please refer to expiry date on indicator test strip bottle.

Storage

Store the Accelerated Hydrogen Peroxide® Indicator Test Strips at room temperature between 59°F and 86°F (15°C–30°C). Do not expose the strip to direct sun light. Ensure the container is closed when not used.

Important Precautions

Keep the strip in the original container. Remove only the required strip before testing and immediately replace the cap tightly. Exposure of the uncovered strip to light and moisture may cause discoloration of the strip. Do not touch the reagent pad with finger or any other surface.

Certificate of Compliance is available upon request.

Principle of the Test

The reaction of the AHP® Test is based on a proprietary coupling system where the product reacts with an iodide salt and a coupler to form a brown coloured complex.


**1
DIP**



**2
HOLD**



**3
MATCH**

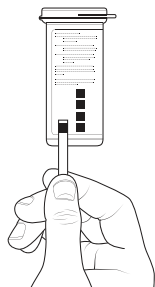

AHP2

Bandelettes indicatrices

Pour l'usage avec les désinfectant
de haut niveau à 2% et Stérilisant

Numéro de la pièce. AHP2

Description

Il est facile d'employer les bandes d'essai du peroxyde d'hydrogène accéléré (AHP), il s'agit de plonger les bandes dans le concentré et lire ces bandes d'essai afin de déterminer la concentration en peroxyde d'hydrogène, et déterminer l'application.

Mode d'emploi

1. Tremper le tampon réactif qui se trouve à l'extrémité de la bandelette dans la solution d'essai, et le retirer après une seconde.
2. Secouez doucement, permettant d'enlever le surplus de liquide. Après la retirer, tenir la bandelette horizontalement et démarrer la minuterie.
3. Attendre 60 secondes et comparer la couleur de la bande à la couleur du bloc sur la bouteille. Si la couleur de la bande est plus faible que la couleur du bloc sur la bouteille (ou on indique "FAIL"), la concentration de la solution est au dessous des normes, vous devriez donc jetée cette solution. Le bloc de couleur sur la bouteille ne sert que référence seulement et ne doit pas être utilisé pour mesurer le niveau de peroxyde d'hydrogène.

REMARQUE: Une lecture différée de la couleur de la bandelette peut invalider les résultats.

Durée de conservation

Ne pas utiliser la bandelette après la date de péremption.
Veuillez consulter la date d'expiration sur la bouteille.

Entreposage

Stockez les bandes d'essai de peroxyde d'hydrogène accéléré à la température ambiante entre 59°F et 86°F (15°C–30°C). N'exposez pas la bande à la lumière ou au soleil direct. Assurez vous que le contenant est ferme lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions importantes

Maintenez la bande dans le récipient original. Enlevez seulement la bande requise avant l'essai et remplacez immédiatement le couvert sur la bouteille. L'exposition de la bande découverte à la lumière et à l'humidité peut causer la décoloration de la bande. Ne touchez pas la partie colorée avec le doigt ou aucune autre surface.

Un certificat de conformité est disponible sur demande.

Principe de L'essai

La réaction de l'essai d'AHP est basée sur un système de propriété industrielle d'accouplement où le produit réagit avec du sel d'iode et un coupleur qui forme un coloré, brun complexe.


1 TREMPER



2 TENIR



3 COMPARER

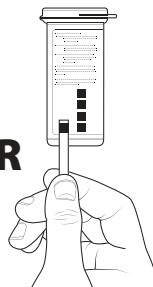

Distribué par:
Virox Technologies Inc.
2770 Coventry Rd., Oakville, ON, L6H 6R1, Canada
1-800-387-7578 www.virox.com



Patented

REF276 (26/264)

Accelerated Hydrogen Peroxide® and Design are trademarks of Diversey, Inc.