



Indicator Strips

Part No. AHP425

Indicator Strips For Use with 4.25%
Concentrate AHP® Products
(1:16, 1:32, 1:64, 1:128 Dilution)

Description

Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®) Indicator Test Strips are easy to use, dip-and-read reagent strips to verify the concentration of hydrogen peroxide, the active ingredient in AHP®. **The Test Strips were DESIGNED for use with the 4.25% AHP® Surface Disinfectant Concentrates diluted to 1:16 1:32, 1:64, and 1:128.**

Direction For Use

(1:16, 1:32, 1:64, 1:128)

1. Dip the padded end of the indicator test strips into the diluted solution and remove after one second.
2. Do not shake the test strip. Once removed, hold the strip horizontally and start the timer.
3. Match the indicator test strip to one of the following color blocks between 50 and 55 seconds to verify the dilution rate.

NOTE: Delayed reading of the strip color may invalidate the results.
The strip color will continue to darken after the read time.

Shelf life

Do not use the strip after the expiration date (opened or unopened).
Please refer to expiry date on indicator test strip bottle.

Storage

Store the Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®) indicator test strips at room temperature between 15°C–30°C (59°F–86°F). Do not expose the strip to direct sunlight. Ensure the cap is closed tightly after each use.

Important Precautions

Keep the unused test strips in the original container. Remove only the required test strip before testing and ensure the cap is closed tightly after each use. Exposure of the uncovered test strip to light and moisture may cause discoloration of the strip. Do not touch the reagent pad with finger or any other surface.


**1
DIP**



**2
HOLD**



**3
MATCH**

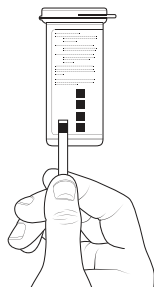

Distributed by:
Virox Technologies Inc.
2770 Coventry Rd., Oakville, ON, L6H 6R1, Canada
1-800-387-7578 www.virox.com





Bandas indicadoras

N.º de pieza AHP425

Instrucciones

Las tiras indicadoras de Peróxido de Hidrógeno Acelerado (AHP®) son tiras reactivas de fácil uso (sumergir-y-leer) para verificar la concentración de peróxido de hidrógeno, el ingrediente activo del desinfectante AHP®. **Los indicadores están diseñados para ser utilizados con las diluciones 1:16, 1:32, 1:64 y 1:128 del desinfectante de superficies concentrado 4.25%.**

Modo de uso

(1:16, 1:32, 1:64, 1:128)

1. Sumergir la banda reactiva que se encuentra en el extremo de la tira indicadora dentro de la solución diluida. Retirar la banda de la solución luego de pasado 1 segundo.
2. Una vez que la banda se retire de la solución no agitar. Sostener la banda indicadora horizontalmente y comenzar a tomar el tiempo en un minutero.
3. Comparar el color de la banda reactiva y hacer coincidir con uno de los colores de referencia en un intervalo de 50 a 55 segundos para determinar el grado de dilución.

NOTE: Una lectura retardada invalidará el resultado de la prueba, debido a que el color de la banda reactiva se continuará oscureciendo con el tiempo.

Vencimiento

No usar después de la fecha de vencimiento, aún cuando el paquete este cerrado. Consulte la fecha de caducidad en el envase.

Almacenamiento

Conservar los indicadores a temperatura ambiente entre los 15°C–30°C (59°F–86°F). No exponer a luz del sol. Asegurar que la tapa del envase permanezca cerrada después de cada uso.

Importante Precauciones

Mantener las tiras indicadoras en el envase original. Extraer solo el número de indicadores necesarios y cerrar el envase inmediatamente. La exposición del indicador a luz o humedad puede causar decoloración del mismo. No tocar la tira reactiva (almohadilla) con los dedos o cualquier otra superficie.

Indicadores para usar con productos de AHP® concentrado (4.25%).
Indicadores para determinar diluciones de 1:16, 1:32, 1:64 y 1:128


1 SUMERGIR



2 SOSTENER



3 COMPARAR

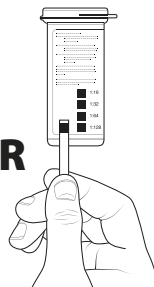

Distribuido por:
Virox Technologies Inc.
2770 Coventry Rd., Oakville, ON, L6H 6R1, Canada
1-800-387-7578 www.virox.com



REF274 (26/264)

Accelerated Hydrogen Peroxide® and Design are trademarks of Diversey, Inc.